


ÚDRŽBA TURBÍN

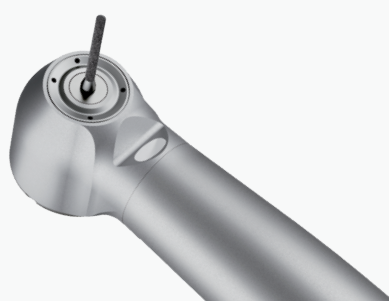

Úplný postup čištění a sterilizace naleznete v návodu k použití k výrobku. Tento zdravotnický prostředek se dodává v „nesterilním“ stavu. Před použitím prostředku se ujistěte, že je tento postup dodržen.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

⊘ **Neponořujte přístroj do lázně s NaCl ani do ultrazvukové čističky.**


1 PŘÍPRAVA



A. ODSTRAŇOVÁNÍ VRTÁKU


- Vyjměte rotační frézu z upínacího mechanismu.

2 PŘEDČASNÉ ČIŠTĚNÍ

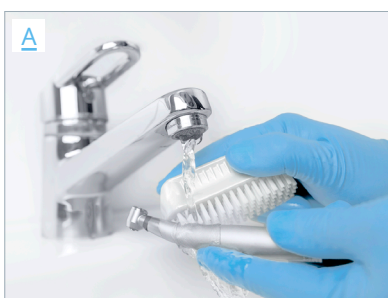

A. OPLACHUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

- Vnější i vnitřní povrch zařízení očistěte pod tekoucí vodou.

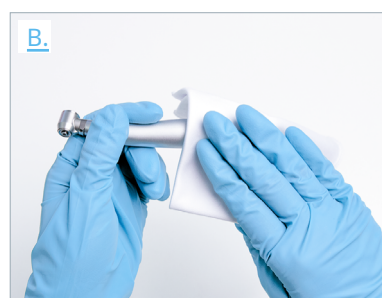

B. ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT/USADENIN

- Osušte trysky a poté zbytek nástroje sterilním netkaným obkladem (textilií s nízkým obsahem žmolků).

3 DEZINFEKCE



A. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

- Ponořte zařízení do lázně s čisticím/dezinfekčním prostředkem.
- Zařízení čistěte hladkým, pružným kartáčem. **NEPOUŽÍVEJTE** drátěný kartáč.
- Zařízení dvakrát opláchněte pod tekoucí vodou z kohoutku.



B. VOLITELNÉ: AUTOMATICKÁ DEZINFEKCE

- Proveďte automatické mytí nebo čištění/dezinfekci.**
- Po čištění/dezinfekci zkontrolujte, zda nezůstaly žádné zbytky čisticího prostředku, a v případě potřeby znovu opláchněte.
- Po čištění/dezinfekci zkontrolujte, zda je zařízení suché. V případě potřeby jej ručně osušte (viz 4).


* *Pro více informací se prosím řiďte pokyny k použití od výrobce*

4 RUČNÍ ČIŠTĚNÍ A SUŠENÍ



A. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ A SUŠENÍ SPREJEM

- Zatřeptejte Stříkací síť před použitím.
- Vyberte vhodné Stříkací síť tryska ^{1*}
- Držte hrot nástroje směrem dolů a chraňte jej sterilní netkanou textilí.
- Aktivujte Stříkací síť.

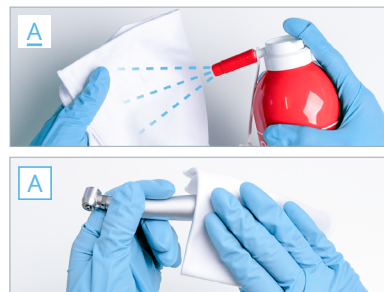

- Vnější část turbíny osušte hadříkem namočeným v Stříkací síť.

⚠ Zařízení vždy osušte.


5 MAZÁNÍ

A. MAZÁNÍ PŘÍSTROJEM LUBRIMED



(Pro 2-/3cestné a 4cestné turbíny viz vložený obrázek níže)

NEBO B. MAZÁNÍ PŘÍPRAVKEM LUBRIFLUID

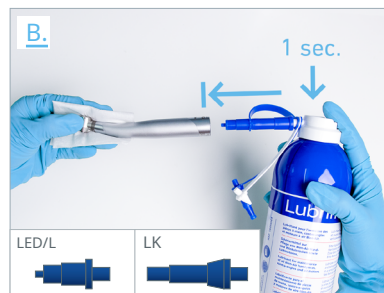


- Zatřeptejte Lubrifluid před použitím.
- Použijte Lubrifluid příloha ^{1*}
- Vyberte vhodné Lubrifluid tryska ^{2*}
- Držte hrot nástroje směrem dolů a chraňte jej savým hadříkem.
- Aktivujte Lubrifluid.

POUZE PRO 2-/3-CESTNÉ A 4-CESTNÉ TURBÍNY



2-/3cestný

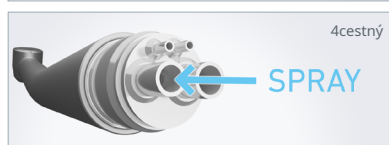

SPRAY



4cestný

SPRAY

**B'. VNITŘNÍ MAZÁNÍ PŘÍSTROJEM LUBRIFLUID
POUZE PRO 2-/3-CESTNÉ A 4-CESTNÉ TURBÍNY**

- Použijte Lubrifluid příloha 1* 
- Vybte vhodné Lubrifluid tryska 3* 
- Držte hrot nástroje směrem dolů a chráňte ho svým hadříkem; stiskněte Lubrifluid tlačítko po dobu 1 sekundy.

△ Nastříkejte do otvoru, jak je znázorněno na obrázcích pro „2-/3cestný“ a „4cestný“.


6 STERILIZACE



A. VLOŽTE TURBÍNU DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU



**B. STERILIZUJTE V SOULADU S POKYNY
VÝROBCE**


- V autoklávu lze sterilizovat pouze nástroje označené tímto symbolem. 

△ Sterilizujte pouze nástroje, které byly řádně vyčištěny, vysušeny a namazány.


ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ



SPRAYNET
Čistící sprej 500 ml, balení po
6 kusech
REF. 1600036-006

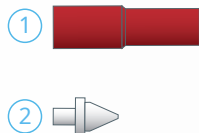

LUBRIFLUID
500ml lubrikant
Balení po 6 kusech
REF. 1600064-006

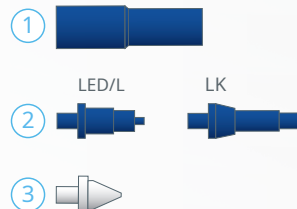

LUBRICARE 2
Systém údržby
REF. 1601156-001



MAZANÝ
Balení po 6 kusech
REF. 1600037-006